



SOLUCIONES DE CUIDADO DE LA SALUD

Camas

TÚ

1 Protectores laterales de una pieza

cubren toda la longitud de la cama

Los protectores laterales de una pieza ofrecen la máxima seguridad en 3/4 partes o en toda la longitud de la cama.

ELIGES...

2 Protectores laterales de dos piezas

[opcionalmente extraíble]

Los protectores laterales en dos piezas no sólo ofrecen flexibilidad cuando es necesario, sino también muchas ventajas cuando se trata de la prevención de caídas, la movilidad y el mantenimiento de la autonomía de los residentes.



1. PROTECTORES LATERALES DE UNA PIEZA

Los protectores laterales de una pieza ofrecen la máxima seguridad en tres cuartas partes o en toda la longitud de la cama.



POLLUX

Una distancia garantizada entre las dos barandillas laterales hace que los protectores laterales Pollux cumplan fácilmente con las normas más estrictas. Los protectores laterales sólo pueden bajarse utilizando las dos manos. Este sistema de seguridad se ha desarrollado para evitar que los protectores laterales se bajen involuntariamente. Los protectores laterales Pollux también pueden utilizarse con extensiones de cama, siempre que se adquiera un juego de extensión.



TRIX

Los protectores laterales Trix constan de tres raíles laterales que ofrecen la máxima seguridad. Un sistema telescópico integrado asegura que los protectores laterales Trix -incluso cuando la cama está extendida- cubran los lados de la cama en toda su longitud. Los protectores laterales sólo pueden bajarse con las dos manos. Este sistema de seguridad evita que los protectores laterales se bajen involuntariamente.



ATMOSPHERE

Los protectores laterales Atmosphère ofrecen la máxima seguridad al paciente en cada posición de la cama. Los protectores laterales constituyen una unidad, protegen al paciente en 3/4 de la longitud de la cama y pueden bajarse mediante un sencillo mecanismo de bloqueo.



PANEL LATERAL

Cuando no se desea ninguna protección lateral, es posible optar por un panel lateral de una sola pieza tapizado o recubierto de resina de melamina. Puede elegir entre un panel lateral desmontable o fijo. La elección se aplica siempre a toda la cama.



TRIX

Sistema telescópico

Un sistema telescópico integrado que asegura que los protectores laterales de Trix - incluso con la cama extendida - cubran los lados de la cama en toda su extensión.

2. PROTECTORES LATERALES DE DOS PIEZAS

Los protectores laterales divididos ofrecen flexibilidad cuando es necesario, pero también muchas ventajas cuando se trata de la prevención de caídas, movilidad y mantenimiento de la autonomía de los residentes.

AL ELEGIR LOS PROTECTORES LATERALES DIVIDIDOS, LOS LADOS DE LA CAMA PUEDEN DIVIDIRSE EN 4 POSICIONES.

- Las posiciones 1 y 2 están situadas en el lado de la cabeza (izquierda y derecha).
- Las posiciones 3 y 4 están situadas en el lado de los pies (izquierda y derecha).



Cada posición puede protegerse por separado



PARA CADA POSICIÓN, LA ELECCIÓN DEBE DECIDIRSE ENTRE PROTECCIÓN O ACABADO.

Puede elegir entre :

- Protectores laterales Twin para una mejor protección
- un panel lateral que oculta la estructura de la cama a la vista

Panel lateral o protectores laterales Twin

PUEDA ELEGIR ENTRE UNA PROTECCIÓN O UN ACABADO EXTRAÍBLE O FIJO. ESTA ELECCIÓN SE APLICA SIEMPRE A TODA LA CAMA.


Los protectores laterales y paneles intercambiables de Twin pueden ser extraíbles y poner fácilmente sin necesidad de herramientas.



Fijo



Extraíble

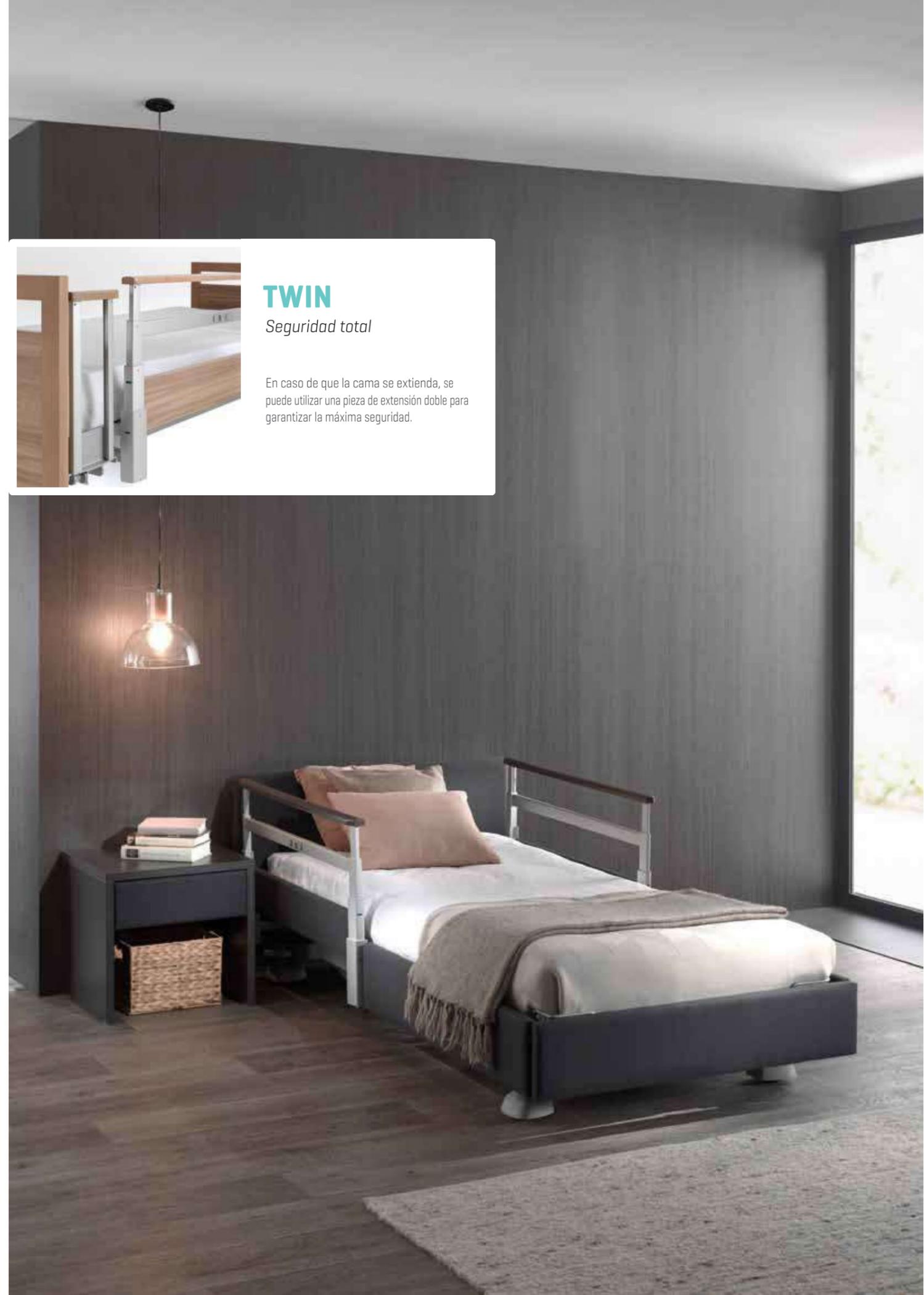

TWIN

Seguridad total

En caso de que la cama se extienda, se puede utilizar una pieza de extensión doble para garantizar la máxima seguridad.

Protectores laterales Twin

La seguridad y la facilidad de uso son de suma importancia en el diseño de Twin

CONTROL VISUAL

Los protectores laterales están bloqueados en su posición más alta cuando los pasadores verdes son visibles.



SIN RIESGO DE SUJECIÓN

Los protectores laterales Twin garantizan un espacio libre suficiente en su posición más baja, como se describe en la norma IEC 60601-2-52.



PUESTOS



Máxima protección
(3 secciones)

Posición para mejorar la movilidad (2 secciones)

Posición de apoyo (2,5 cm)

Posición compacta

SEGURIDAD INTEGRADA


Antes de poder manipular los protectores laterales, hay que levantar primero el larguero superior. Este mecanismo de bloqueo se ha desarrollado para evitar que los protectores laterales se bajen involuntariamente.



¿Cómo elegir?

Sigue estos pasos para cada posición.

¿PROTECCIÓN O MENOS PROTECCIÓN?

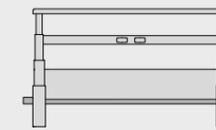

Twin barandillas

01. ACABADOS TWIN


Los protectores laterales Twin pueden tener un acabado de tapicería o un revestimiento de resina de melamina. Cuando se utilizan en hospitales, recomendamos los protectores laterales Twin con un acabado de aluminio.



Twin tela


Twin madera

Twin Aluminio con panel de madera

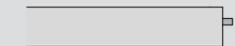

ACABADO DEL PANEL LATERAL

El panel lateral puede tener un acabado de tapicería o un revestimiento de resina de melamina

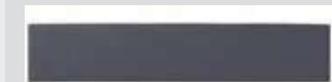

Twin tela/polipiel



Twin madera

ACABADO SUPERIOR DE BARANDILLA

La barandilla superior puede tener un acabado de madera o de aluminio.



barandilla superior en madera sólida



barandilla superior en aluminio

FLEXIBILIDAD

El cliente debe elegir entre una versión desmontable o fija del protector lateral. Esta elección se aplica siempre a toda la cama.



Fija



Extraíble

FLEXIBILIDAD

El cliente debe elegir entre una versión desmontable o fija del protector lateral. Esta elección se aplica siempre a toda la cama.



Fija



Extraíble

Combinaciones elegidas con frecuencia

CONFIGURACIÓN 1

Máxima protección



Protección Twin en todas las posiciones.

CONFIGURACIÓN 2

Protección en la cabecera de la cama



Protectores Twin en las posiciones 1 y 2, panel lateral en las posiciones 3 y 4.

Consejo: con los protectores laterales extraíbles es posible cambiar a configuración 1 fácilmente.

CONFIGURACIÓN 3

Máxima comodidad



Paneles laterales Twin en todas las posiciones.

Consejo: Con los protectores laterales extraíbles es posible cambiar a configuración 1 y 2 fácilmente.

GALERÍA DE COMBINACIONES...

la elección es tuya

Las amplias posibilidades de configuración y materiales permiten crear una cama que se ajuste perfectamente a sus deseos y necesidades.

Paneles de cama

La estructura de cama es versátil y permite elegir entre diferentes tipos de paneles de cama. Cada panel se caracteriza por sus líneas claras y atención a los detalles.

	ALTO	MEDIO	BAJO
<i>Los paneles medios y bajos no pueden utilizarse con barandillas Trix y Pollux</i>			
Tipo 1: Midea Panel de cama estándar			
Tipo 2: Neo Panel de cama tapizado [fino]			
Tipo 3: Lusso Panel de cama tapizado [grueso]			
Tipo 4: Edén Panel de cama de madera			
Tipo 5: Puro Panel de cama de madera			
Tipo 6: Felina Panel de cama de madera			
Tipo 7: Valentino Panel de cama de madera			

GALERÍA DE COMBINACIONES ...

la elección es tuya

La protección lateral elegida determina la elección del tipo de panel de la cama. El panel de los pies y de la cabeza puede elegirse libremente entre las opciones mencionadas. También son posibles las combinaciones de paneles altos, medios y bajos.

¿QUÉ PASA SI...?

(casi) todo es posible?

Acabado en madera

El acabado en madera da a la cama un toque natural y cálido. La madera es resistente a las manchas y las bacterias, y se puede limpiar fácilmente. Gracias a nuestra amplia colección de colores estándar, la cama puede integrarse totalmente en el interior de su centro/hogar

o tapizado...

Los materiales suaves, como la tapicería y la imitación de cuero, aumentan el confort y ofrecen posibilidades adicionales para personalizar la cama. La colección de tapicerías ha sido cuidadosamente seleccionada y cumple con los más altos requisitos de limpieza y resistencia.



Las Care Solutions se aplican a las siguientes camas



VELINO
armonía perfecta

La cama de enfermería Velino es una cama de columna multifuncional de altura regulable que maximiza tanto la comodidad del paciente como la facilidad de uso. El carro abierto es ideal para limpiar la zona bajo la cama.



LAGO
seguridad y confort

La seguridad y la comodidad van de la mano con la cama Lago. La posición baja de la cama, de 25 cm, reduce el riesgo de caídas, mientras que la altura de trabajo ergonómica, de 80cm, garantiza un cuidado eficaz.



ARTENA
elegante certeza

La cama de enfermería Artena es una cama de altura regulable que cumple los requisitos de alta calidad, diseño y funcionalidad a los que se enfrentan diariamente tanto el paciente como el personal de enfermería.



OLYMPIA
comodidad con estilo

La cama Olympia: probada, duradera y segura. Un ajuste de alto/bajo muy estable mediante brazos de soporte, combinado con un diseño muy funcional, hacen de esta cama un todoterreno.

Selección de mesitas de noche



QUADRA Y ATLAS
elegante y práctico

La mesita de noche también puede tener una bandeja de cena Livia abatible, ajustable en altura e inclinable. Versiones disponibles:

- una cara: armario, espacio abierto, cajón
- de dos caras: ídem de una cara, accesible por ambos lados
- con frigorífico: frigorífico, espacio abierto, cajón
- con cajón alto: cajón alto, espacio abierto, cajón
- bajo: armario y cajón
- XLow: dos cajones

La mesita de noche Atlas se diferencia de la gama Quadra por sus formas frontales redondeadas. Bandeja de cena Livia abatible, regulable en altura e inclinable como opción. También disponible en 6 versiones.



COSI
hogareña

La mesita de noche Cosi tapizada crea una sensación de unidad con la cama, ya que los materiales pueden combinarse totalmente.



BASSO
compacto y elegante

La mesita de noche Basso Care modelo bajo, es muy compacta y combina perfectamente con la gama de camas Lago.

Basso está disponible en diferentes versiones:

- Fondo cerrado o fondo abierto
- Cajón tapizado o de madera
- Cajón con o sin tirador



LAGO CARE

Cama

LAGO CARE

Características



01. SOMIER

Para una posición de descanso cómoda

El somier está equipado de serie con perfiles metálicos de somier con buena ventilación. Los perfiles del somier opcionales [*] pueden desmontarse y limpiarse fácilmente.

02. MANDO

Fácil de usar de forma autónoma

Funcional y fácil de manejar manualmente. El mando está dotado de todas las funciones para poner la cama en la posición de asiento, tumbada o de lectura deseada.

03. PANELES

De diseño

Los paneles de la cama (cabecero y piecero) están disponibles en diferentes variantes de diseño y alturas. También es posible optar por paneles de cama tapizados.

04. RECEPTÁCULOS

Cuidado óptimo

En función de las necesidades de tratamiento, los dos receptáculos situados en la cabecera de la cama pueden utilizarse para instalar una barra de suero, una barra de elevación u otros accesorios.

05. BARANDILLAS [*]

La seguridad no tiene precio

Las barandillas partidas twin ofrecen flexibilidad, pero también muchas ventajas cuando se trata de la prevención de caídas, la movilidad y el mantenimiento de la autonomía de los residentes. Las barandillas continuas Trix pueden ajustarse y son la máxima protección, incluso cuando la cama se ha extendido.

06. SISTEMA ALTO/BAJO

Muy estable

Los soportes altos/bajos garantizan una cama sumamente estable a cualquier altura. La cama puede ajustarse entre ± 25 cm y ± 80 cm, lo que facilita la entrada y salida de la cama y optimiza el tratamiento.

07. FRENO

De fácil acceso

Las ruedas con 2 frenos, simplifican el transporte por parte del personal de enfermería.

08. RUEDAS OCULTAS

Funcionalidad oculta

Unas tapas ocultan las ruedas, lo que favorece el aspecto hogareño de la cama. Opcionalmente, se pueden instalar ruedas con freno central.

09. SOPORTES DE COLCHÓN

Colchón fijo en cada posición

El respaldo y el reposapiés están equipados con 2 soportes para colchones.



FOLLETO SOLUCIONES CARE

Para más información sobre las opciones de acabados.

¿QUÉ PASA SI... [casi] todo es posible?

El concepto Care Solutions de la guía en la configuración de su cama.

[*] opcional


Fácil de usar

La cama Lago Care ofrece comodidad al paciente y al personal de asistencia en cualquier situación.

POSICIÓN PARA DORMIR



La cama ofrece una posición para dormir a una altura extra baja de ± 25 cm, lo que reduce considerablemente los riesgos en caso de caída.

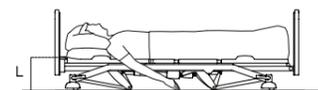

POSICIÓN MÁS ALTA



La posición más alta de la cama es de ± 80 cm. El paciente puede ser examinado y tratado sin forzar su espalda.



TRENDELEBURG INVERSO



La posición Trendelenburg inversa puede activarse mediante el mando, mientras que la posición Trendelenburg sólo puede utilizarse mediante combinaciones de teclas o el mando con sistema de bloqueo selectivo.



POSICIÓN DE ENFERMERÍA (*)



Pulsando un solo botón, todas las secciones de la plataforma del colchón se ponen en horizontal, mientras que la cama se coloca en su posición más alta.



POSICIÓN DE SENTADO O RELAX



Tanto el respaldo como el reposa rodillas se inclinan simultáneamente. La posición Trendelenburg inversa se activa cuando se elige una posición de relax en la cama Lago.



(*) opcional

Confort para todos

La posibilidad de que el residente viva de forma independiente en su casa o en una residencia no sólo facilita el trato del personal de enfermería, sino que también ofrece unas condiciones de vida dignas al residente.



FUNCIONES ADICIONALES a través de combinaciones de teclas



Bloquear todo
combinación de botones -L-



Desbloquear / Reiniciar
combinación de botones -R-



CPR
combinación de botones -C-




Posición de traslado
combinación de botones -T-


Esta combinación de botones lleva la cama a una posición de traslado preestablecida.




AJUSTE DE ALTURA: 25 - 42 - 80 CM

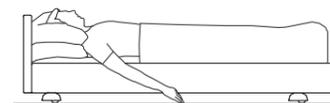

La cama ofrece una posición para dormir a una altura de ± 25 cm, lo que reduce considerablemente los riesgos en caso de caída.

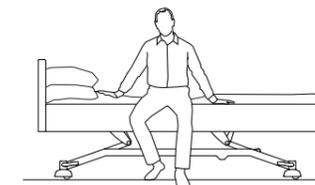

Para abandonar la cama con facilidad, una función especial hace que la cama se detenga automáticamente a la altura del asiento. Gracias a ello, el paciente puede salir de la cama cómodamente.

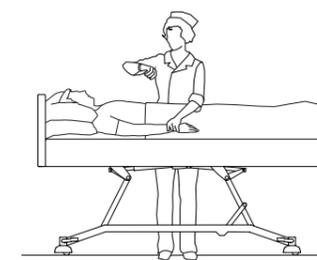

El personal de asistencia puede atender al paciente a una altura ergonómica de ± 80 cm.

Seguridad, movilidad y flexibilidad

La necesidad de cuidados depende del grado de independencia del residente. Esta necesidad se produce en la mayoría de los casos de forma lenta, pero a veces se requiere una intervención inmediata.

PEDAL DE FRENO

El pedal activa las 2 ruedas delanteras o traseras, y puede colocarse en 2 posiciones. Con un solo movimiento se activa el freno o se colocan las ruedas en posición neutra.



2 ruedas con frenos



2 ruedas sin freno

Esta posición permite mover la cama en todas las direcciones posibles.

Opcionalmente, son posibles las ruedas con freno central.



FÁCIL ACCESO DE GRÚAS

La altura de la cama puede ajustarse fácilmente, lo que permite el uso de una grúa para pacientes. Por lo tanto, la cama Lago es ideal para que el personal de asistencia preste los cuidados diarios de forma eficiente.



EXTENSIÓN DE CAMA INTEGRADA

Una cama asistencial tiene que satisfacer los deseos de todos, independientemente de la longitud del paciente. La extensión de cama integrada permite ampliar la cama en 20 cm.

Si se combina con la extensión de reposapiés opcional (*), se garantiza una funcionalidad completa del somier.



RESPALDO RETRÁCTIL

Al inclinar el respaldo hacia arriba, éste se desplaza automáticamente hacia atrás. Al hacerlo, se alivia la presión sobre la pelvis, mientras que el riesgo de escaras se reduce considerablemente. Gracias a una seguridad integrada en el respaldo retráctil, no hay ninguna abertura entre los protectores laterales y la plataforma del colchón durante la inclinación. Esto evita que el paciente se quede atascado.



SISTEMA DE BLOQUEO SELECTIVO (*)

El mando con sistema de **bloqueo selectivo** permite bloquear las funciones de la cama de forma selectiva mediante una llave magnética.

Las **ventajas** son:

- 1 mando central para manejar y bloquear las funciones de la cama.
- Activación eficaz mediante el mando, sin forzar la espalda.



(*) opcional

LUZ BAJO LA CAMA

Una discreta luz nocturna (*) bajo la cama se encarga de que el paciente pueda orientarse en una habitación con poca luz, sin tener que molestar a los demás pacientes o al personal. La luz nocturna se activa mediante el mando con sistema de bloqueo selectivo.

MOVILIDAD

La cama Lago Care se puede mover en cada posición, excepto cuando se ha puesto en la posición de seguridad (posición más baja).

Una solución para cada situación

Nuestros diferentes tipos de barandillas ofrecen al paciente una seguridad total en cada posición de la cama. Cada tipo tiene sus ventajas específicas tanto para el usuario como para el residente. La elección es completamente suya.



POLLUX

Una distancia garantizada entre las dos barandillas laterales hace que las barandillas Pollux cumplan fácilmente con las normas más estrictas. Solo pueden bajarse utilizando las dos manos. Este sistema de seguridad se ha desarrollado para evitar que se bajen involuntariamente. También pueden utilizarse con extensiones de cama, siempre que se adquiriera un juego de extensión.



TRIX

Las barandillas Trix constan de tres ralles laterales que ofrecen la máxima seguridad. Un sistema telescópico integrado asegura, incluso cuando la cama está extendida, que se cubran los lados de la cama en toda su longitud. Sólo pueden bajarse con las dos manos. Este sistema de seguridad evita que se bajen involuntariamente.



ATMOSPHERE

Las barandillas Atmosphère ofrecen la máxima seguridad al paciente en cada posición de la cama. Constituyen una unidad, protegen al paciente en 3/4 de la longitud de la cama y pueden bajarse mediante un sencillo mecanismo de bloqueo.



TWIN

Estas barandillas partidas están disponibles en versión simple o doble. La versión doble ofrece protección en toda la longitud de la cama. También puede servir como ayuda para la elevación. Un seguro integrado evita que se bajen involuntariamente.



Accesorios

Los accesorios que ofrecemos pueden conectarse armoniosamente con las fundas y los receptáculos de accesorios existentes. Prestamos mucha atención a esto, para que los accesorios le ofrezcan la misma calidad superior que nuestras camas.



01. Poste de elevación

Está fabricada con un tubo de acero doblado de doble grosor. Está equipada con un asa y una cinta que puede ajustarse manualmente. También está disponible opcionalmente una cinta con un sistema de enrollado automático.

02. IV Soporte para pértiga de elevación

Consta de 4 ganchos. Se puede instalar fácilmente en el poste de elevación.

03. Varilla IV

Consta de una parte fija y otra regulable en altura. La parte ajustable en altura está equipada con 4 ganchos y debe apretarse mediante un botón giratorio. La barra intravenosa también está disponible en una versión no ajustable con 2 ganchos.

04. Soporte flexible para mando

El soporte asegura que el mando esté al alcance tanto del paciente como del personal. Se instala en un estuche.

05. Bandeja para barandillas

La bandeja está hecha de un marco de haya maciza y una parte superior de laminado macizo fresado. La bandeja puede colocarse en ambos tipos de barandillas. Se puede colgar fácilmente en el panel de los pies.

06. Soporte de incorporación

La ayuda de elevación vertical ofrece al usuario un apoyo ideal para entrar y salir de la cama. Se coloca en el interior del somier fijo.

07. Funda para barandillas

La funda extraíble está hecha de imitación de cuero y puede colocarse fácilmente alrededor de las barandillas. Esta funda está especialmente recomendada para proteger a los residentes inquietos.

08. Extensión del reposapiés extraíble

Para utilizar el somier de modo óptimo cuando la cama está extendida, puede optar por una extensión de somier suelta de 20 cm que debe colocarse en el extremo de los pies.


09. Barrandilla para extensión

En caso de que la cama se extienda, se puede utilizar una pieza de extensión Twin para garantizar la máxima seguridad.

Acabados y calidad

Una amplia gama de colores de nuestra colección le ayuda a integrar la cama perfectamente en su centro.

Madera maciza

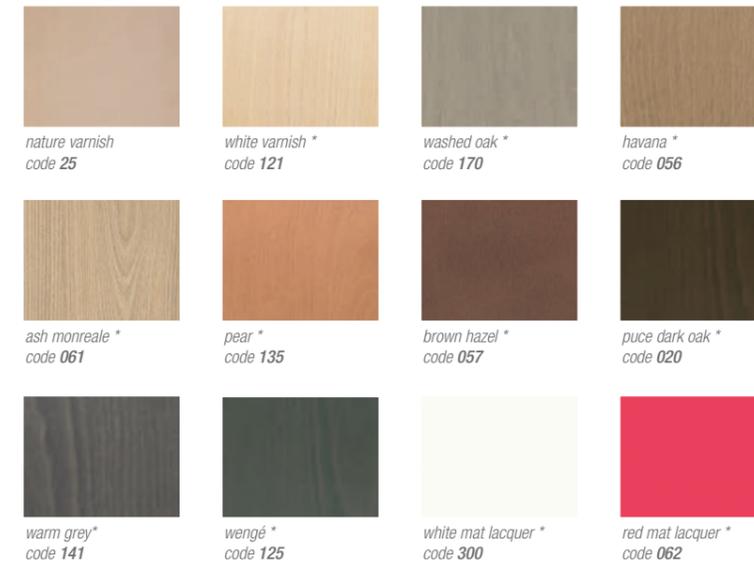

La madera es un producto natural. Son posibles pequeñas desviaciones de color.

Opciones de tapizado

Es posible realizar soluciones para el cliente para que la cama se integre perfectamente en su interior. Puede elegir entre nuestra amplia gama para tapizar la cama Lago. Todas las tapicerías cumplen con los requisitos específicos del sector.





Diseño contemporáneo

Durabilidad

Fácil de mantener

BARANDILLAS TWIN

Seguridad

01. 4 SECCIONES

La seguridad ante todo

Gracias a las 4 secciones hay pequeños espacios entre las barras. Esto reduce el riesgo de atrapamientos.



02. MARGEN DE SEGURIDAD DE 12 CM

Sin riesgo de atrapamiento para los pies

Las 4 secciones garantizan que las barandillas pueden ser muy altas, pero al mismo tiempo muy compactas cuando se bajan. Mantienen la distancia requerida según la norma EN 60601-2-52.



03. PROTECCIÓN SEGURA DE PINZAMIENTOS

Uso sin preocupaciones


Cuando se bajan las barandillas Twin, se detienen automáticamente a la altura de 2,5 cm. De este modo, no se pellizcan los dedos al bajar los protectores laterales.



04. EL PANEL SE ELEVA

Seguro y ergonómico

El panel se desliza hacia arriba. Esto reduce el espacio entre las secciones. No hay riesgo de atrapamiento, ya que el hueco se rellena con el panel.

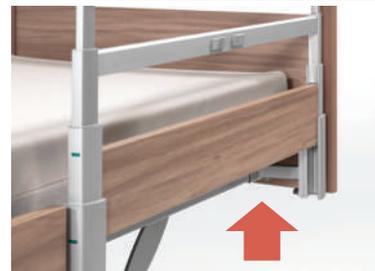

Ergonomía

01. PEDAL DE FRENO

Accesible en todas las posiciones


El panel de las barandillas Twin también puede deslizarse hacia arriba sin necesidad de desplegarlas. Esto hace que el pedal de freno sea fácilmente accesible incluso en la posición más baja.



02. AYUDA A LA INCORPORACIÓN

Soporte necesario

In the intermediary position, the sideguards can serve as a stand-up aid. The top bar provides the necessary support to the resident.

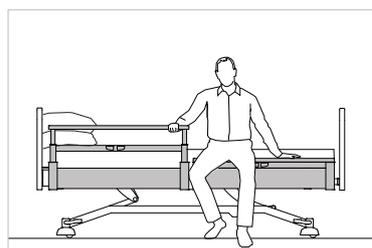

03. BARRA SUPERIOR

Mejor agarre


La barra superior ergonómica de madera o aluminio proporciona un buen agarre y apoyo. La mano puede cerrarse completamente alrededor de la barra, lo que proporciona el agarre necesario al levantarse.



04. CUIDADO ERGONÓMICO

Seguro y apropiado para la espalda

El panel se desliza hacia arriba. Cuando la cama está en una posición más alta, es posible que el personal coloque las piernas y las rodillas bajo la cama.

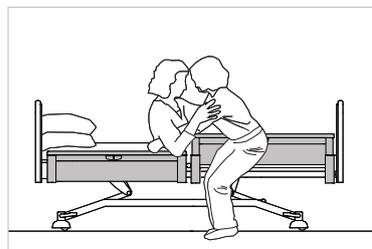

Utilidad y diseño

01. SEGURIDAD INTEGRADA

Sin ningún riesgo

Hay que levantar la barra superior con una mano para activar los indicadores. Este mecanismo de bloqueo se ha desarrollado para evitar que las barandillas se bajen involuntariamente.



02. CONTROL VISUAL

De un vistazo

Cuando los pasadores verdes son visibles, las barandillas están bloqueadas en la posición más alta.



03. COMPACTO

Valor estético

Las barandillas Twin son muy compactas cuando están en la posición más baja [sólo 7,5 cm por encima del somier] y encajan perfectamente con el diseño de la cama. No son un obstáculo cuando el paciente quiere salir de la cama o tiene que ser trasladado, o cuando hay que hacer la cama.



Posiciones

01. POSICIÓN MÁS BAJA

Posición estética

Altura de 7,5 cm [desde el somier]. En esta posición más baja las secciones de las barandillas no son visibles. Salir de la cama es cómodo y sin obstáculos [no hay ninguna presión a nivel de las piernas].



02. SEGURIDAD Y POSICIÓN DE LA BARRA

Siéntase seguro

Esta posición permite utilizar las barandillas como asidero, lo que da una sensación de seguridad al tumbarse en la cama.



03. POSICIÓN DE MOVILIDAD [2 SECCIONES]

Ayuda para levantarse

Height of 30 cm [from the mattress platform]. In this intermediary position, the sideguards can serve as a stand-up aid. The top bar provides the necessary support to the resident.



04. POSICIÓN MÁS ALTA [3 SECCIONES]

Protección óptima

Altura de 41 cm [desde el somier]. Esta posición elevada protege al paciente de forma óptima en su cama. Esta altura permite el uso de colchones antiescaras con un grosor de hasta 19 cm.





Lago Care



Manipulación		Mando 3 secciones	Mando 4 secciones	Mando HD
RESPALDO				
RESPOSA RODILLAS				
POSICIÓN RELAX				
ALTO/BAJO				
POSICIÓN DE DORMIR				
ANTI-TREND				
Operaciones de emergencia				
TREND				
CPR				
Funciones profesionales				
posición de traslado				
posición de cuidado				



Lago Care



Bloquear/desbloquear

Mando 3 secciones

Mando 4 secciones


Mando HD



Bloqueado



Desbloqueado


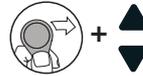


Encendido/apagado de la luz




Posición rápida

Palanca

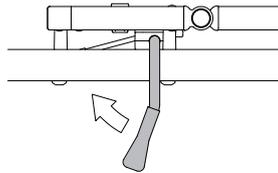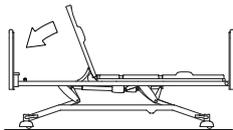

Extensión de la cama


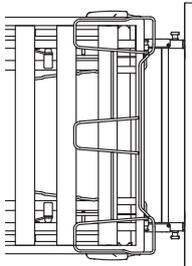


1. levante el reposapiés
2. extraiga los dos mangos de arrastre
3. extraiga la extensión de la cama
4. bloquee los botones
5. extraiga la extensión de los pies [opcional]

2 por 2 ruedas con freno

2 ruedas sin freno

2 ruedas con freno

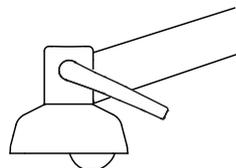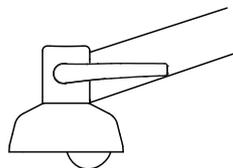




Mando

creamos muebles para curar, cuidar y facilitar



Funciones básicas

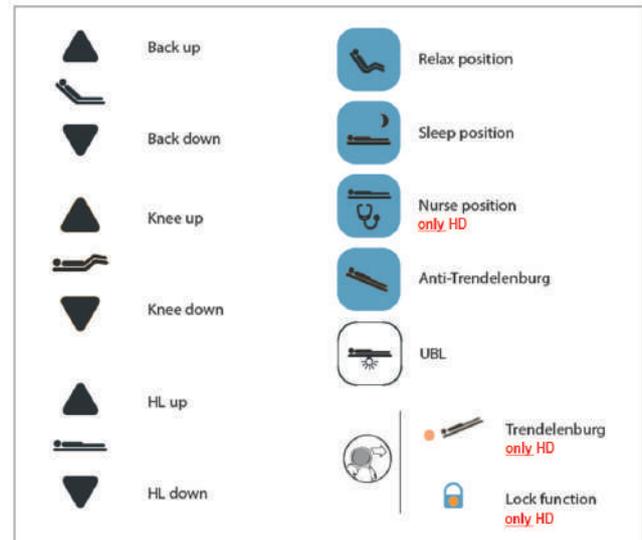

Funciones adicionales

